



INFORMACION SOBRE LA AURICULOTERAPIA

Básicamente, podemos definir a la **Auriculoterapia** como aquella ciencia de la medicina alternativa que se ocupa del **diagnóstico y tratamiento de enfermedades a través de la estimulación de puntos energéticos ubicados en el pabellón auricular para obtener un resultado terapéutico** en el paciente que estamos tratando.

La Auriculoterapia es diagnóstico y tratamiento de enfermedades, mientras que la Auriculomedicina es el diagnóstico de enfermedades.

Se halla basada en la Medicina Tradicional China (MTC) y en los **fundamentos** que dió Paul Nogier en Francia en 1950. El fundamento de esta técnica se basa, como se verá más adelante, en la estimulación de puntos ubicados en la oreja a través de la piel.

SOMATOTOPÍAS

Existen en algunas partes del organismo, zonas donde en las mismas se halla representado en su totalidad el cuerpo entero. Estas son: **las manos, los pies, los ojos, el cráneo, la lengua y la oreja**.

A estos lugares se les llama **somatotopías**. Brevemente podemos decir, que son la imagen completa del organismo en ese sitio. De ahí que la Acupuntura, Craneopuntura y otras formas de estimulación sean efectivas por la estimulación en esos puntos.

Podemos afirmar que las somatotopías son verdaderos hologramas, es decir imágenes proyectadas en su totalidad si partimos del concepto de que “en una parte está el todo y el todo está en una parte”.

Por la oreja podemos realizar **diagnósticos presuntivos** que luego confirmaremos con la clínica, con los signos y síntomas que presenta nuestro paciente y con la historia biopatográfica del mismo, sin perder jamás la idea de que el ser humano que recurre a nosotros, no es solamente una oreja, sino que debemos tener en cuenta todo lo que nos relata, no únicamente en el aspecto clínico, sino y muy especialmente todo lo que lo afecta en el plano espiritual, psíquico y en sus diversos cuerpos mental, astral, etérico y físico.

VENTAJAS DEL USO DE LA AURICULOTERAPIA

- La auriculopuntura **se puede acompañar en el mismo momento** de ser necesario de cualquier terapia natural o de cualquier otro tipo de tratamiento homeopático o alopático.
- **Nunca se le pide al paciente que abandone su sistema terapéutico**, si no lo desea, pues esta técnica es un **complemento** más en el arsenal terapéutico actual.
- Es de **fácil manejo**.
- Se obtienen **buenos y rápidos resultados**.
- Tiene pocas **contraindicaciones**.
- Es **económica**.
- Es **valiosa para el diagnóstico de las enfermedades**.
- Se puede aplicar como **medida terapéutica y preventiva**.

BREVE HISTORIA DE LA AURICULOTERAPIA

La acupuntura corporal data de aproximadamente **5.000 años antes de Cristo** y se comenzó haciendo la práctica de la misma con agujas de hueso de animales.



La Auriculoterapia comienza su historia en la antigua China cuando Hoang Ti Nei Kug comenzó a describirla en el Tratado de Medicina del Emperador Amarillo, haciendo su relación a través de los meridianos entre los años 1698 y 2598 a.C.

En **Francia, año 1950**, el **Dr. Paul Nogier**, neurólogo de Lyon, observó la frecuencia de cicatrices en la oreja de pacientes que habían sido cauterizados para aliviar su dolencia del nervio ciático (actualmente no es necesario la cauterización para el alivio de la lumbociatalgia), solamente se puntura, o tan solo se le apoya un sensor detector de puntos y se realiza una electroestimulación de muy baja intensidad, que produce un cosquilleo, generado por una aparato alimentado a pilas. El Dr. Nogier comenzó a relacionar distintas patologías con los diferentes lugares de la aurícula y fue desarrollando el **Mapa Somatotópico** de la oreja, basados en el concepto de la orientación invertida del feto en el pabellón auricular. Esto fue presentado en Francia, luego a la Sociedad Alemana de Acupuntura y finalmente trasladado a China.

China: año 1960, un equipo de médicos del ejército en Nanking verificó la exactitud del mapa de Nogier.

Estados Unidos: año 1980, un estudio a doble ciego en la Universidad de California, verificó estadísticamente la exactitud del Auriculodiagnóstico, relacionando áreas específicas de elevado dolor, con un incremento en la actividad eléctrica en la oreja, áreas del cuerpo con alguna disfunción podían ser correctamente identificadas en la aurícula.

LA AURICULOTERAPIA SIN AGUJAS CON ORIMAG®

Orimag® especial para adelgazar sin privarse y Orimag® anti-stress para recuperar calma y serenidad. Un método natural, simple, eficaz, duradero y probado científicamente. La auriculoterapia es reconocida por la organización mundial de la salud (OMS) desde 1990.

UN DESCUBRIMIENTO FRANCÉS.

En 1951, un medico francés hizo la primera cartografía de los puntos que se conectan entre la oreja y las diferentes partes del cuerpo humano. Estos puntos de auriculoterapia que no duelen en una persona con buena salud son sensibles en la persona afectada.

Luego este medico tuvo la idea de comparar la oreja a la imagen de un feto cabeza abajo y descubrió que la oreja se asemejaba al cuerpo humano.

Todas las funciones del cuerpo son representadas por medio de la oreja, gracias a mas de 200 puntos cada uno de ellos conectado entre si y relacionado con cada órgano o sistema.

Gracias a Orimag y por medio de ligeras presiones, usted puede realizar terapia en casa activando todos estos puntos responsables de la toma de peso y así ayudar el organismo a reencontrar nuevamente su equilibrio natural.

ORIMAG® ESPECIAL PARA ADELGAZAR

Atrévete adelgazar por medio de la oreja con Orimag® en tan solo unos minutos diarios. Si probaste ya todos los métodos, sin nunca ganar la batalla contra el sobrepeso, no pierdas la esperanza! Orimag® puede ser la mejor opción.



No te pedirá voluntad, ni régimen estricto o ejercicios extenuantes. Será tu último combate para liberarte de esos kilos de más y recuperar tu bienestar y gozo de vivir.

Orimag® Trata directamente el origen del problema. La parte interna del Orimag esta recubierta de 9 pequeñas bolas de acero inoxidable que ejercen presión ligera y real sobre todos los puntos responsables de la toma de peso.

Orimag® libera la energía y estimula tus órganos internos: vejiga - intestino - riñones - vesícula biliar - bazo/páncreas - estomago - hígado - bazo - pulmones.


A causa de nuestro modo de vida moderno (vida sedentaria, stress, mala alimentación), las funciones naturales de eliminación de desechos y toxinas son insuficientes y ya no pueden cumplir su papel. Esto tiene como consecuencia: toma de peso, somnolencia, mala digestión, vientre inflamado.

Orimag® es particularmente indicado para favorecer a obtener un vientre plano, eliminar las toxinas responsables del sobre peso y el control del apetito.

El intestino perezoso así que flatulencias aparecen durante el día, después de una comida en general. Las mujeres son mas afectadas por este problema. Su silueta se modifica de repente, no con una toma de peso si no con un aumento brutal de la talla de la cintura. Hay que trabajar entonces sobre los gases abdominales y el vientre se desinfla.

¿Como se usa el Orimag® para adelgazar?

- Haga un masaje presionando suavemente las 2 orejas de 2 a 4 minutos según su sensibilidad. Se hace de 2 a 4 veces diario.
- Tome un poco de agua después de cada masaje.
- Deje los Orimag® a vista para no olvidar de utilizarlos.
- Es importante usar Orimag® regularmente por lo menos un mes completo.
- Se puede hacer el masaje antes y después de las comidas.
- Después de un mes, siga haciendo masajes todos los días tanto como sea necesario.
 - o Si al principio le duele, es una buena señal. Reduzca un poco el tiempo y sobre todo siga!

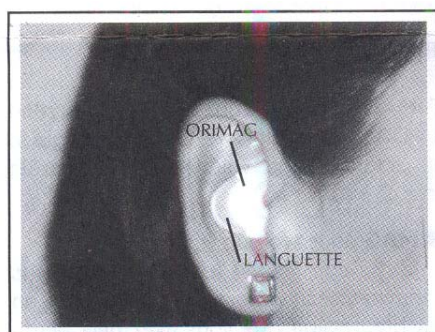

Posición de Orimag



Tocar ligeramente el Orimag de la lengüeta y masajear con ligeras presiones

Como el centro de la oreja varia muy poco de un individuo a otro, Orimag® es creado para todo tipo de orejas. Orimag® dura toda la vida. Es totalmente reusable todos los días. No necesita ni pilas, ni electricidad. El efecto es puramente mecánico.

CONTRAINDICACIONES

No hacer uso de Orimag en casos:

- Se encuentre en un estado anormal de enfermedad.
- Si una enfermedad ha agravado.
- Sepsis Aguda.
- Neurolepticos mayores.
- Mujeres embarazadas.



MANTENIMIENTO:

Limpiar el Orimag® con algodón y alcohol de 90°.

Reusable.

Puede durar toda la vida.

EL ORIMAG ANTI-STRESS



Termine naturalmente con el stress y el insomnio. Hoy en día el stress y la ansiedad afectan millones de personas de todas las edades a un momento u otro de su vida y a usted?

Zonas que trata:

- **Zona fatiga:** Orimag® anti-stress estimula los puntos hepáticos, pancreáticos, de bazo, vesícula biliar, hígado y ojos dándoles además energía.
- **Zona insomnio:** desordenes de la vida moderna (ejemplo: desarreglos en el reloj biológico). Orimag® anti stress estimula el punto “maestro cero” el cual influye en la sensibilidad del cuerpo y tiene una acción general positiva.
- **Zona ansiedad, angustia, stress:** Orimag® anti stress actúa sobre dos factores: equilibra la “la línea de los sentidos”, los puntos de ansiedad...y la zona “maestra de piel” que tiene una acción sobre el comportamiento.

¿Como utilizar Orimag anti-stress?

1. Coloque el aparato en el hueco del centro de la oreja. Presione el aparato sobre la oreja con los 2 dedos pulgar e índice durante 2 a 3 minutos.
2. Se puede hacer con las 2 orejas en el mismo tiempo o una después de la otra ,dispone de 2 aparatos, azul oscuro para la oreja derecha y azul claro para la izquierda.
3. Es imperativo actuar sobre las 2 orejas. 2 veces de 2 a 3 minutos diario.
4. Sentirá la acción positiva del Orimag en los primeros días

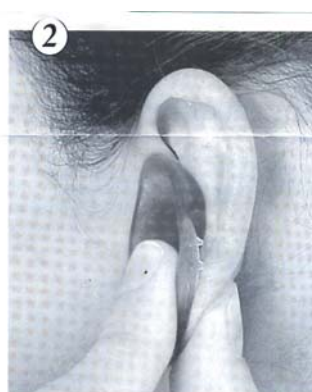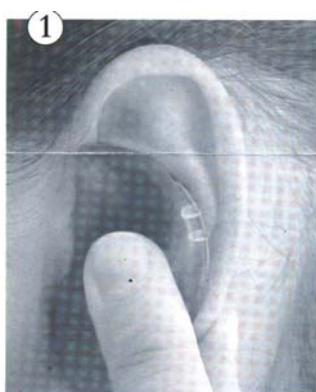

CONTRAINDICACIONES

No hacer uso de Orimag® en casos:

- Se encuentre en un estado anormal de enfermedad.
- Si una enfermedad ha agravado.
- Sepsis Aguda.
- Neurolepticos mayores.
- Mujeres embarazadas.



MANTENIMIENTO:

Limpiar el Orimag® con algodón y alcohol de 90°.

Reusable.

Puede durar toda la vida.

Spa Electrónico
México

Web site: www.orimag.com.mx
www.spaelectronico.com.mx
www.mundialsigloxxi.com

Teléfono: 01 777 3 23 74 91

Skype: spaelectronico y/o spaelectronicoCuernavaca oficial